


BA-5-12A陶瓷纤维马弗炉

[详细信息...](#)

货号:	3104784	品牌:	本昂仪器
单位:	台	重量:	
属性:			
详细资料:	<p>BA-5-12A陶瓷纤维马弗炉详细介绍</p> <ol style="list-style-type: none">1、双层炉壳、强力通风设计，确保外壳不烫、内壳迅速降温的目标，实现温度快速升降的目的2、炉体表面喷涂采用进口室外空调用漆，永不退色、光亮如新3、炉膛选用日本合资企业生产——板式陶瓷纤维炉膛，其加热元件采用两则衬板式，具有升温速度快、可更换、节能显著、工作效率高，并可大大改善工作人员的实验环境4、烟囱采用不锈钢材质加而成，美观、耐用5、电器控制部分全部选用日本岛电、欧母龙原装配件，性能可靠6、设有30段自编控温程序，可以按不同实验要求自行设定升、降温过程(选购)7、采用不锈钢铠装热电偶。具有反应灵敏，控温精度高，耐高温性的优点8、设有防止断电或因故障停机后来电误启动功能9、炉门设有可靠的开门断电开关，确保操作人员安全10、设有过流、过压、热电偶故障、超温保护等多项安全防护措施，防止意外发生11、可选配：60程序控制控温仪、无纸记录仪、小长图记录仪、圆盘记录仪等12、加热元件选用优质炉丝，性能稳定、可靠，寿命长 <p>BA-5-12A陶瓷纤维马弗炉技术参数</p> <ol style="list-style-type: none">1、炉膛：板式陶瓷纤维，两侧加热板可单独更换(日资企业生产) 工作室尺寸：300x200x120mm2、设计温度：1200℃3、工作温度：1100℃4、控温精度：±1℃5、控温形式：日本岛电PID智能控温仪表6、日本原装进口固态继电器7、传感器：不锈钢铠装8、升温速率：100℃--1000℃时，≥45℃/min9、降温速率：1000℃--200℃时，≥10℃/min10、电源电压：AC—220V（单相）11、功率：4KW		

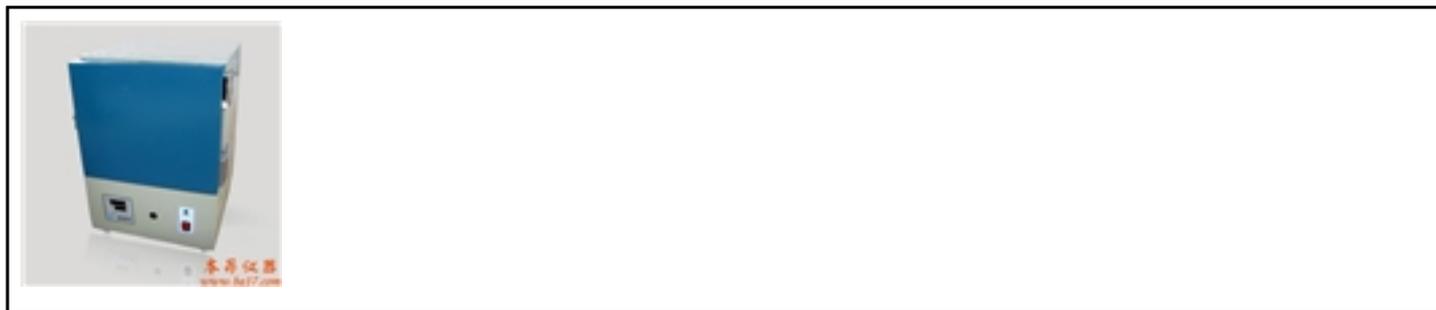

关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市共和新路435号
凯鹏国际大厦18楼G座E-mail：sales@ba17.com邮编：200070

[更多相关资料请点击访问...](#)