


BA-2S拍击式均质器

[详细信息...](#)

无菌均质器			
货号:	7173350_C_C	品牌:	本昂仪器
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	<p>BA-2S拍击式均质器详细介绍</p> <p>BA-2S拍击式均质器是用来将不同的物质进行均质，以获得该物质具有代表意义的样本。BA-2S拍击式均质器简单耐用，只需将样品和稀释液加入到无菌的过滤器样品袋中，然后将样品袋放入均质仪中，关上门即开始和完成样品的处理。BA-2S拍击式均质器可以有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微生物均一样品，确保无菌袋中混合全部的样品具有充分的代表性。BA-2S拍击式均质器主要应用在食品、药品、临床、分子学、毒素及细菌检测等领域。</p> <p>BA-2S拍击式均质器主要特点：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 安静和容易操作；2. 可调整的均质时间；3. 固定的或可变的均质速度；4. 无菌一次性滤袋，保证卫生和安全；5. 全开启式门，易于清洗；6. 玻璃透明窗口易于观察；7. 样品与均质仪无接触，如无样品泄露则不需进行系统清洗；8. 废液槽以防止样品袋泄漏；9. 为操作者的安全着想，设计有自动停止霍尔开关装置，以防止操作失误夹伤手指 <p>BA-2S拍击式均质器技术参数：</p> <p>时间：10S30S60S90S120S180S600S连续运行，8档可调。</p> <p>拍击速度：3-12次/秒</p> <p>容量：30-400ML</p> <p>外型尺寸：250×460×310</p> <p>电源：220V/50Hz</p> <p>重量：23kg</p> <p>功率：165W</p> <p>无菌均值袋：17×30cm</p>		

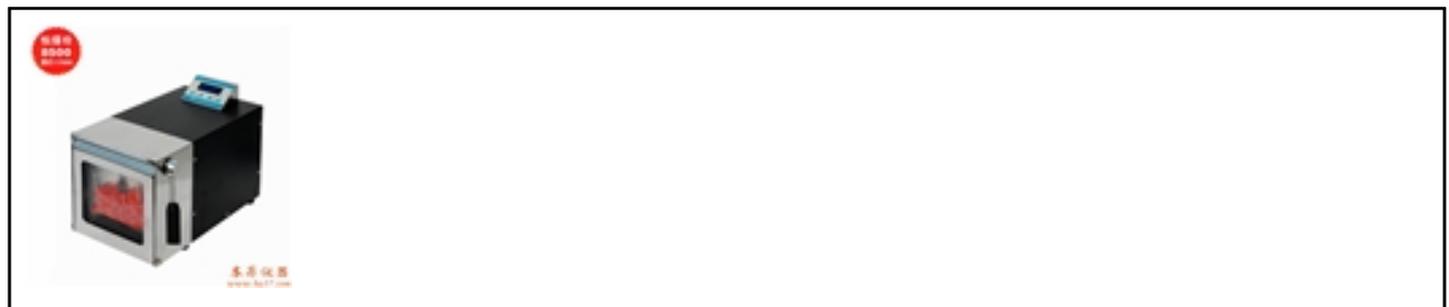

关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市共和新路435号
凯鹏国际大厦18楼G座E-mail: sales@ba17.com邮编：200070

[更多相关资料请点击访问...](#)